
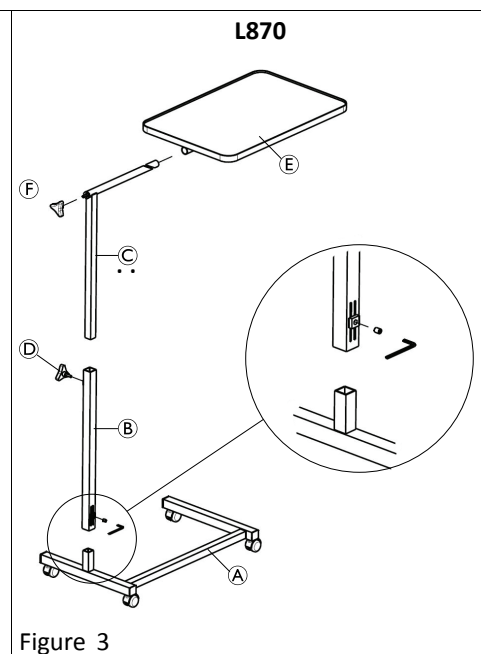


# Invacare® Accessories

Invacare® Pausa (L865), Invacare® Kauma (L872), Invacare® Baya (L870)

en	Bed side tables User Manual .....	2	it	Vassoi letto a carrello Manuale d'uso .....	6
da	Sengeborde Brugsanvisning .....	2	lt	Prie lovos statomi staliukai Naudojimosi instrukcija .....	7
de	Beistelltische Gebrauchsanweisung .....	3	lv	Galdiņi pie gultas Instrukciju rokasgrāmata .....	8
es	Mesitas para cama Manual del usuario .....	4	nl	Bedtafels Gebruiksaanwijzing .....	8
fi	Vuoteen sivupöydät Käyttöohje .....	4	no	Sidebord for senger Bruksanvisning .....	9
fr	Tables de chevet Manuel d'utilisation .....	5	pt	Mesas de cabeceira Manual de utilização .....	10
hr	Stolići uz krevet Upute za uporabu .....	6	sv	Sängbord Bruksanvisning .....	10

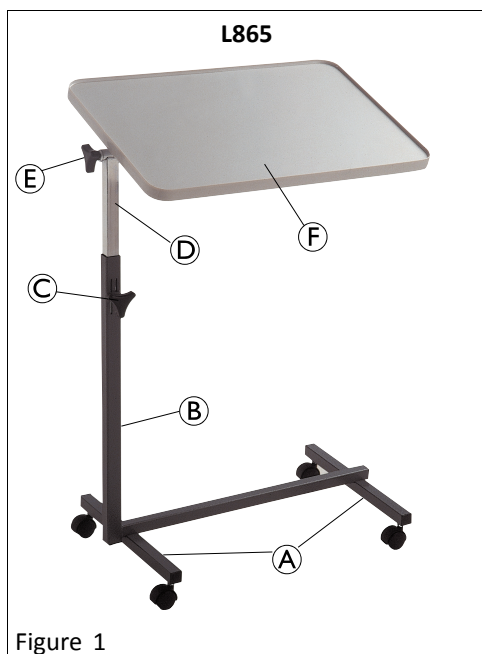

	L865	L872	L870
	10 kg	10 kg	10 kg

This manual MUST be given to the user of the product.  
BEFORE using this product, this manual MUST be read and saved for future reference.



**Yes, you can.®**

## 1 Safety



### CAUTION!

- Check that the product has been delivered in perfect condition before you use it.
- If you are unsure about usage, adjustment or maintenance of the product, contact your Invacare distributor.
- Do not exceed the maximum load, shown on the product label.
- Do not use or store the product outdoors.
- Periodically check stability and rigidity of the product and, where applicable, that the screws are tightened.

### Cleaning and disinfection

- Remove any dirt or dust using a soft, damp cloth.
- Use soap and water to remove stubborn stains.
- Dry with a soft cloth.
- For disinfection in hospital environments, follow the hygiene specialist's recommendations.

### 1.1 Warranty Information

We provide a manufacturer's warranty for the product in accordance with our General Terms and Conditions of Business in the respective countries.

Warranty claims can only be made through the provider from whom the product was obtained.

## 2 Assembly

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

See figure 1

1. Attach the two feet on castors ① under the frame ② using 2 screws.
2. Insert hand screw ③ into the upper section of the frame ②.
3. Slide the square tube of the tray support ④ into the vertical section of the frame ②, so that the tray support is located above the frame base.
4. Loosen hand screw ⑤ and slide the tray ⑥ on the tray support.
5. Adjust the tray to the desired inclination and tighten hand screw ⑤.
6. Adjust the height of the tray and tighten hand screw ③.

### 2.2 Invacare®Kauma (L872)

See figure 2



### CAUTION!

- The height adjustment system is controlled by a spring.
- Follow the instructions in this paragraph carefully and in the indicated order.

1. Install the rack ① on the base ②:
  - a. Insert the two large screws in the two-hole plate, and insert the two small cylinders.
  - b. Place this assembly below the castor base and tighten the screws through the base into the rack.  
Make sure, the tray is located above the base.
2. Install the tray ③ by sliding it onto its support and fix it using two 8x15 screws.
3. Install the adjustment system:  
Carefully unscrew the small black screw above the red label and replace it with the small grey screw supplied with the table.  
DO NOT remove the screw covered by the red label.

### Adjusting the height

- To raise the tray, pull it upwards.
- To lower the tray, press the black lever.

### 2.3 Invacare®Baya (L870)

See figure 3

1. Install the square tube ① on the base ② using an Allen key.
2. Install the tray ③ on the tray holder tube and lock it with hand screw ④.
3. Slide the tray holder ⑤ into the square tube ①.  
Make sure, the tray is located above the base.
4. Adjust the height of the tray and tighten hand screw ④.

## 1 Sikkerhed



### FORSIGTIG!

- Kontrollér, at produktet er leveret perfekt stand, før du tager det i brug.
- Hvis du er i tvivl om brugen, indstillingen eller vedligeholdelsen af produktet, skal du kontakte din Invacare-forhandler.
- Undgå at overskride den maksimale belastning, der vises på produktmærkaten.
- Undgå at bruge eller opbevare produktet udendørs.
- Kontrollér med jævne mellemrum produktets stabilitet, og stram skruerne, hvis det er nødvendigt.

### Rengøring og desinfektion

- Fjern eventuelt snavs eller støv med en blød fugtig klud.
- Brug sæbe og vand til at fjerne genstridige pletter.
- Tør efter med en blød klud.
- Følg hygiejnespecialisternes anbefalinger ved desinfektion i hospitalsmiljøer.

### 1.1 Garantioplysninger

Vi yder en producentgaranti på produktet i overensstemmelse med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkår i de respektive lande.

Der kan kun rejses garantikrav gennem den forhandler, som produktet er købt hos.

## 2 Samling

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Se figur 1

1. Monter de to fødder på svinghjul ① under rammen ② ved hjælp af 2 skruer.
2. Stik håndskruen ③ ind i den øverste del af rammen ②.

3. Skub det firkantede rør på bakkeholderen ④ ind i den lodrette del af rammen ⑥, så bakkeholderen er placeret oven over rammens understel.
4. Derefter skal du løsne håndskruen ⑤ og skubbe bakken ⑥ ind på bakkeholderen.
5. Indstil bakken til den ønskede hældning, og stram håndskruen ⑤.
6. Indstil bakkens højde, og stram håndskruen ③.

## 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Se figur 2



### FORSIGTIG!

Systemet til højdeindstilling styres af en fjeder.  
– Følg anvisningerne i dette afsnit omhyggeligt og i den angivne rækkefølge.

1. Monter den lodrette holder ② på understellet ①:
  - a. Sæt de to store skruer ind i pladen med de to huller, og indsæt de to små cylindere.
  - b. Placer den samlede enhed under hjulstellet, og stram skruerne, der holder stellet og holderen sammen. Sørg for, at bakken er placeret oven over understellet.
2. Monter bakken ③ ved at skubbe den ind på bakkeholderen, og fastgør den med to 8x15-skruer.
3. Monter indstillingssystemet:  
Skrue forsigtigt den lille sorte skrue oven over den røde mærkat ud, og erstat den med den lille grå skrue, der fulgte med bordet.  
Fjern IKKE den skrue, der er dækket af den røde mærkat.

### Højdeindstilling

- Træk op i bakken for at hæve den.
- Tryk på det sorte håndtag for at sænke den.

## 2.3 Invacare®Baya (L870)

Se figur 3

1. Monter det firkantede rør ② på understellet ① ved hjælp af en unbrakonøgle.
2. Monter bakken ⑤ på bakkeholdererrøret, og lås den med håndskruen ⑥.
3. Skub bakkeholderen ④ ind i det firkantede rør ②. Sørg for, at bakken er placeret oven over understellet.
4. Indstil bakkens højde, og stram håndskruen ③.

## 1 Sicherheit



### VORSICHT!

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob es in perfektem Zustand geliefert wurde.
- Wenn Sie sich bei der Verwendung, Einstellung oder Instandhaltung des Produkts über etwas nicht im Klaren sind, wenden Sie sich an Ihre Invacare-Vertretung.
- Die auf dem Typenschild angegebene zulässige Höchstbelastung darf nicht überschritten werden.
- Das Produkt nicht im Freien verwenden oder lagern.
- Überprüfen Sie regelmäßig Stabilität und Starrheit des Produkts und, sofern zutreffend, ob die Schrauben festgezogen sind.

### Reinigung und Desinfektion

- Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen, feuchten Lappen.
- Hartnäckige Verschmutzungen können mit Wasser und Seife entfernt werden.

- Verwenden Sie zum Trocknen ein weiches Tuch.
- Befolgen Sie bei der Desinfektion in Krankenhausumgebungen die Empfehlungen des Hygieneexperten.

## 1.1 Garantieinformationen

Wir gewähren für das Produkt eine Herstellergarantie gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das entsprechende Land.

Garantieansprüche können nur über den Händler geltend gemacht werden, von dem das Produkt bezogen wurde.

## 2 Montage

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Siehe Abbildung 1.

1. Die zwei Standbeine mit den Schwenkrädern ① mit zwei Schrauben unter dem Rahmen ② anbringen.
2. Die Handschraube ③ im oberen Bereich des Rahmens ② einsetzen.
3. Das Vierkantrohr der Tischablage ④ so in den vertikalen Teil des Rahmens ② schieben, dass sich die Tischablage über der Rahmenbasis befindet.
4. Die Handschraube ⑤ lösen und die Tischablage ④ auf die Halterung schieben.
5. Die gewünschte Neigung der Tischablage einstellen und die Handschraube ⑤ festziehen.
6. Die Höhe der Tischablage einstellen und die Handschraube ③ festziehen.

### 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Siehe Abbildung 2.



### VORSICHT!

Die Höhenverstellung wird über eine Feder gesteuert.  
– Beachten Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt sorgfältig und in der angegebenen Reihenfolge.

1. Den Träger ② an der Basis ① montieren:
  - a. Die zwei großen Schrauben in die Platte mit den zwei Bohrungen sowie die zwei kleinen Zylinder einsetzen.
  - b. Diese Baugruppe unter der Schwenkradbasis platzieren und die Schrauben durch die Basis in den Träger eindrehen.  
Darauf achten, dass sich die Tischablage über der Basis befindet.
2. Die Tischablage ③ montieren. Hierfür die Tischablage auf den Träger schieben und mit zwei Schrauben (8 x 15) befestigen.
3. Montieren der Höhenverstellung:  
Die kleine schwarze Schraube über dem roten Aufkleber vorsichtig herausdrehen und durch die kleine graue Schraube ersetzen, die dem Beistelltisch beiliegt.  
NICHT die vom roten Aufkleber verdeckte Schraube entfernen.

### Anpassen der Höhe

- Zum Höherstellen die Tischablage einfach nach oben ziehen.
- Zum Absenken der Tischablage den schwarzen Hebel drücken.

### 2.3 Invacare® Baya (L870)

Siehe Abbildung 3.

1. Das Vierkanthrohr ⑥ mit einem Innensechskantschlüssel an der Basis ① montieren.
2. Die Tischablage ⑤ am Halterohr anbringen und mit der Handschraube ⑦ sichern.
3. Das Halterohr ③ in das Vierkanthrohr ⑥ schieben. Darauf achten, dass sich die Tischablage über der Basis befindet.
4. Die Höhe der Tischablage einstellen und die Handschraube ⑦ festziehen.

es

## 1 Seguridad



### ¡PRECAUCIÓN!

- Antes de usar el producto, compruebe que se ha entregado en perfectas condiciones.
- Si tiene dudas sobre el uso, el ajuste o el mantenimiento del producto, póngase en contacto con su distribuidor de Invacare.
- No supere la carga máxima que se muestra en la etiqueta del producto.
- No utilice ni almacene el producto en exteriores.
- De forma periódica, compruebe la estabilidad y la rigidez del producto y, si procede, compruebe que los tornillos están apretados.

### Limpieza y desinfección

- Elimine la suciedad o el polvo con un paño suave y húmedo.
- Use jabón y agua para eliminar las manchas difíciles.
- Seque con un paño suave.
- Para la desinfección en entornos hospitalarios, siga las recomendaciones del especialista sobre higiene.

### 1.1 Información sobre la garantía

Ofrecemos la garantía del fabricante del producto conforme a nuestras Condiciones generales y Condiciones comerciales en los distintos países.

Las reclamaciones relativas a la garantía solo pueden efectuarse a través del distribuidor en el que se adquirió el producto.

## 2 Montaje

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Consulte la figura 1

1. Acople las dos patas en las ruedas ① debajo del chasis ② con dos tornillos.
2. Inserte la palomilla ③ en la sección superior del chasis ②.
3. Deslice el tubo cuadrado del soporte de la bandeja ④ en la sección vertical del chasis ②, de forma que el soporte de la bandeja quede situado encima de la base del chasis.
4. Afloje el palomilla ⑤ y deslice la bandeja ⑥ en el soporte de la bandeja.
5. Ajuste la bandeja en la inclinación que desee y apriete la palomilla ⑤.
6. Ajuste la altura de la bandeja y apriete la palomilla ③.

### 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Consulte la figura 2



### ¡PRECAUCIÓN!

- El sistema de ajuste de la altura se controla mediante un muelle.
- Siga con atención las instrucciones de este párrafo y en el orden que se indica.

1. Instale el bastidor ⑥ en la base ①:
  - a. Inserte los dos tornillos grandes en la placa de dos orificios e inserte los dos cilindros pequeños.
  - b. Coloque este montaje debajo de la base de las ruedas y apriete los tornillos en la base para introducirlos en el bastidor. Asegúrese de que la bandeja se encuentre sobre la base.
2. Instale la bandeja ③ deslizándola en su soporte y fíjela con dos tornillos de 8x15.
3. Instale el sistema de ajuste:
 

Desatornille con cuidado el tornillo pequeño negro que se encuentra encima de la etiqueta roja y sustitúyalo por el tornillo pequeño gris que se suministra con la mesa. NO retire el tornillo que está cubierto con la etiqueta roja.

### Ajuste de altura

- Para subir la bandeja, tire de ella hacia arriba.
- Para bajar la bandeja, pulse la palanca negra.

### 2.3 Invacare®Baya (L870)

Consulte la figura 3

1. Instale el tubo cuadrado ⑥ en la base ① con una llave Allen.
2. Instale la bandeja ⑤ en el tubo del soporte de la bandeja y bloquéela con la palomilla ⑦.
3. Deslice el soporte de la bandejas ③ para introducirlo en el tubo cuadrado ⑥.
 

Asegúrese de que la bandeja se encuentre sobre la base.
4. Ajuste la altura de la bandeja y apriete la palomilla ⑦.

fi

## 1 Turvallisuus



### HUOMIO!

- Tarkista, että tuote on toimitettu täysin kunnossa, ennen kuin käytät sitä.
- Jos olet epävarma tuotteen käytöstä, säädöstä tai huollosta, ota yhteys Invacare-jälleenmyyjään.
- Älä ylitä tuotekilvessä ilmoitettua suurinta sallittua kuormitusta.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta ulkona.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen vakaus ja jäykkyys sekä tarvittaessa ruuvien tiukkuus.

### Puhdistaminen ja desinfiointi

- Poista lika ja pöly pehmeällä, kostealla liinalla.
- Poista hankalat tahrat saippualla ja vedellä.
- Kuivaa pehmeällä liinalla.
- Noudata desinfiointissa sairaalaympäristöissä hygienia-asiantuntijan suosituksia.

### 1.1 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten liiketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehdä vain sen myyjän kautta, jolta tuote ostettiin.

## 2 Kokoonpano

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Katso kuva 1.

1. Kiinnitä kaksi jalkaa pyöriin ① rungon alapuolelle ② 2 ruuvilla.
2. Työnnä käsiruuvi ③ rungon yläosaan ④.
3. Liu'uta tarjottimen tuen neliskanttinen putki ⑤ rungon pystysuoraan osaan ⑥, siten että tarjottimen tuki on rungon alustan yläpuolella.

4. Löysää käsiruuvia ⑤ ja liu'uta tarjotinta ⑥ tarjottimen tuessa.
5. Sääda tarjotin haluttuun kulmaan ja kiristä käsiruuvi ⑤.
6. Sääda tarjottimen korkeutta ja kiristä käsiruuvi ⑤.

## 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Katso kuva 2.



### HUOMIO!

Korkeudensäätöjärjestelmää hallitaan jousella.  
– Noudata tämän kappaleen ohjeita huolellisesti annetussa järjestyksessä.

1. Asenna teline ⑥ alustaan ①:  
a. Työnnä kaksi suurta ruuvia kaksiaukkoiseen levyyn ja aseta kaksi pientä sylinteriä paikalleen.  
b. Aseta tämä kokoonpano pyöräjalustan alapuolelle ja kiristä ruuvit alustan läpi telineeseen.  
Varmista, että tarjotin on alustan yläpuolella.
2. Asenna tarjotin ③ liu'uttamalla se tukeensa ja kiinnitä kahdella 8x15-ruuvilla.
3. Säättöjärjestelmän asentaminen:  
Ruuva varoen auki pieni musta ruuvi punaisen merkin yläpuolelta ja vaihda se pöydän mukana toimitettuun pieneen harmaaseen ruuviin.  
ÄLÄ irrota ruuvia, joka on punaisen merkin peitossa.

### Korkeuden säätäminen

- Nosta tarjotinta vetämällä sitä ylöspäin.
- Laske tarjotinta painamalla mustaa vipua.

## 2.3 Invacare®Baya (L870)

Katso kuva 3.

1. Asenna neliskanttinen putki ⑥ alustaan ① kuusiokoloavainta käyttämällä.
2. Asenna tarjotin ⑤ tarjotinpidikkeen putkeen ja lukitse se käsiruuvilla ⑥.
3. Liu'uta tarjottimen pidike ③ neliskanttiseen putkeen ⑥. Varmista, että tarjotin on alustan yläpuolella.
4. Sääda tarjottimen korkeutta ja kiristä käsiruuvi ⑤.

## 1 Sécurité



### ATTENTION !

- Vérifiez que le produit a été livré en parfait état avant de l'utiliser.
- Si vous avez des doutes sur l'utilisation, le réglage ou la maintenance du produit, contactez votre distributeur Invacare.
- La charge maximale indiquée sur l'étiquette du produit ne doit jamais être dépassée.
- Le produit ne doit pas être utilisé ni stocké à l'extérieur.
- Vérifiez régulièrement la stabilité et la rigidité du produit et, le cas échéant, que les vis sont bien serrées.

### Nettoyage et désinfection

- Retirez les saletés ou la poussière à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- Utilisez de l'eau savonneuse pour enlever les taches tenaces.
- Essuyez avec un chiffon doux.
- En cas de désinfection dans un environnement hospitalier, suivez les recommandations en matière d'hygiène.

## 1.1 Informations de garantie

Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit, conformément à nos conditions générales de vente en vigueur dans les différents pays.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées qu'au fournisseur auprès duquel le produit a été obtenu.

## 2 Montage

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Voir figure 1

1. Fixez les deux pieds sur les roulettes ① sous le châssis ② à l'aide de 2 vis.
2. Insérez la vis ③ dans la section supérieure du châssis ②.
3. Insérez le tube carré du support de plateau ④ dans la section verticale du châssis ②, de sorte à positionner le support du plateau au-dessus de la base du châssis.
4. Desserrez à la main la vis ⑤ et faites glisser le plateau ⑥ sur le support du plateau.
5. Réglez l'inclinaison du plateau et serrez la vis ⑤ à la main.
6. Réglez la hauteur du plateau et serrez la vis ③ à la main.

### 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Voir figure 2



### ATTENTION !

Le système de réglage de la hauteur est commandé par un ressort.  
– Respectez scrupuleusement et dans l'ordre les instructions de ce paragraphe.

1. Installez le support ⑥ sur la base ① :  
a. Insérez les deux grandes vis dans la plaque à deux trous, puis insérez les deux petites entretoises.  
b. Installez cet ensemble sous la base des roulettes et serrez les vis à travers la base dans le support.  
Vérifiez que le plateau se trouve au-dessus de la base.
2. Installez le plateau ③ en le faisant glisser sur son support et fixez-le à l'aide de deux vis 8 x 15.
3. Installez le système de réglage :  
Dévissez doucement la petite vis noire au-dessus de l'étiquette rouge et remplacez-la par la petite vis grise fournie avec la table.  
N'enlevez PAS la vis recouverte par l'étiquette rouge.

### Réglage de la hauteur

- Pour soulever le plateau, tirez-le vers le haut.
- Pour abaisser le plateau, appuyez sur le levier noir.

### 2.3 Invacare®Baya (L870)

Voir figure 3

1. Installez le tube carré ⑥ sur la base ① à l'aide d'une clé Allen.
2. Installez le plateau ⑤ sur le tube de support du plateau et verrouillez-le à l'aide de la vis ⑥.
3. Insérez le support du plateau ③ dans le tube carré ⑥. Vérifiez que le plateau se trouve au-dessus de la base.
4. Réglez la hauteur du plateau et serrez la vis ⑤ à la main.

## 1 Sigurnost



### OPREZ!

- Prije korištenja provjerite je li proizvod isporučen u savršenom stanju.
- Ako niste sigurni kako koristiti, podešavati ili održavati proizvod, kontaktirajte distributera tvrtke Invacare.
- Ne prekoračujte najveće opterećenje prikazano na naljepnici proizvoda.
- Ne koristite ili pohranjujte proizvod na otvorenom.
- Periodički provjerite stabilnost i krutost proizvoda te, ako je primjenjivo, jesu li vijci stegnuti.

### Čišćenje i dezinfekcija

- Uklonite svu prljavštinu ili prašinu pomoću meke, vlažne krpe.
- Tvrdokorne mrlje uklonite sapunom i vodom.
- Osušite mekom krpom.
- Za dezinfekciju u bolničkoj okolini slijedite preporuke higijeničara.

### 1.1 Informacije o jamstvu

Pružamo jamstvo proizvođača za proizvod u skladu s Općim odredbama i uvjetima tvrtke u odgovarajućim zemljama.

Jamstvo se može koristiti samo putem dobavljača kod kojeg je proizvod nabavljen.

## 2 Sastavljanje

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Pogledajte sliku 1

1. Postavite dvije noge na kotačiće **A** ispod okvira **B** pomoću 2 vijka.
2. Umetnite ručni vijak **C** u gornji dio okvira **B**.
3. Umetnite kvadratnu cijev nosača poslužavnika **D** na okomiti dio okvira **B** tako da se nosač poslužavnika nalazi iznad postolja okvira.
4. Otpustite ručni vijak **E** i umetnite poslužavnik **F** na nosač poslužavnika.
5. Podesite poslužavnik na željeni nagib i zategnite ručni vijak **E**.
6. Podesite visinu poslužavnika i zategnite ručni vijak **C**.

### 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Pogledajte sliku 2



### OPREZ!

- Sustavom za podešavanje visine upravlja opruga.
- Pažljivo slijedite upute u ovom poglavlju te navedenim redoslijedom.

1. Instalirajte stalak **B** na postolje **A**:
  - a. Umetnite dva velika vijka u ploču s dvije rupe, potom umetnite dva mala valjka.
  - b. Postavite taj sklop ispod postolja s kotačićima i zategnite vijke kroz postolje u stalak. Poslužavnik mora biti iznad postolja.
2. Instalirajte poslužavnik **C** umetanjem na nosač i pričvrstite ga pomoću dva vijka 8x15.
3. Instalirajte sustav za podešavanje:
 

Pažljivo odvijte mali crni vijak iznad crvene oznake i zamijenite ga malim sivim vijkom priloženim uz stol. NEMOJTE uklanjati vijak pokriven crvenom naljepnicom.

### Podešavanje visine

- Da biste podigli poslužavnik, povucite ga gore.
- Da biste spustili poslužavnik, pritisnite crnu polugu.

### 2.3 Invacare®Baya (L870)

Pogledajte sliku 3

1. Instalirajte kvadratnu cijev **B** na stalak **A** pomoću imbus ključa.
2. Instalirajte poslužavnik **E** na cijev nosača poslužavnika i blokirajte ga ručnim vijkom **F**.
3. Umetnite nosač poslužavnika **C** na kvadratnu cijev **B**. Poslužavnik mora biti iznad postolja.
4. Podesite visinu poslužavnika i zategnite ručni vijak **D**.

## 1 Sicurezza



### AVVERTENZA!

- Prima di utilizzare il prodotto, verificare che sia stato consegnato in condizioni perfette.
- Se si nutrono dei dubbi riguardo all'utilizzo, alla regolazione o alla manutenzione del prodotto, contattare il distributore Invacare.
- Non superare il carico massimo indicato sull'etichetta del prodotto.
- Non utilizzare o conservare il prodotto all'esterno.
- Controllare periodicamente la stabilità e la rigidità del prodotto e, ove applicabile, che le viti siano serrate.

### Pulizia e disinfezione

- Rimuovere eventuale polvere o sporcizia con un panno morbido inumidito.
- Per rimuovere macchie ostinate, usare acqua e sapone.
- Asciugare con un panno morbido.
- Per la disinfezione in ambienti ospedalieri, seguire le raccomandazioni dello specialista di igiene.

### 1.1 Informazioni sulla garanzia

Offriamo una garanzia del produttore per il prodotto in conformità di quanto indicato sui Termini e le condizioni generali di vendita applicabili nei rispettivi paesi.

La garanzia può essere fatta valere solo attraverso il fornitore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

## 2 Montaggio

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Vedere figura 1.

1. Attaccare i due piedi sulle ruote girevoli **A** sotto il telaio **B** usando 2 viti.
2. Inserire la vite della maniglia **C** nella sezione superiore del telaio **B**.
3. Fare scivolare il tubo quadrato del supporto del vassoio **D** nella sezione verticale del telaio **B**, in modo che il supporto del vassoio si trovi sopra la base del telaio.
4. Allentare la vite della maniglia **E** e fare scorrere il vassoio **F** sull'apposito supporto.
5. Regolare il vassoio all'inclinazione desiderata e serrare la vite della maniglia **E**.
6. Regolare l'altezza del vassoio e serrare la vite della maniglia **C**.

### 2.2 Invacare® Kauma (L872)

Vedere figura 2.

**AVVERTENZA!**

Il sistema di regolazione dell'altezza è controllato da una molla.

– Seguire attentamente e nell'ordine indicato le istruzioni fornite in questo paragrafo.

1. Installare nella sezione superiore del telaio **Ⓐ** sulla base **Ⓐ**:
  - a. Inserire le due viti grandi nella piastra a due fori e infilare i due cilindri piccoli.
  - b. Collocare questo montaggio sotto la base della ruota orientabile e serrare le viti nella sezione superiore del telaio attraverso la base.  
Assicurarsi che il vassoio si trovi sopra la base.
2. Installare il vassoio **Ⓒ** facendolo scorrere sul relativo supporto e fissandolo con due viti da 8 x 15.
3. Installare il sistema di regolazione:  
Svitare con attenzione la piccola vite nera sopra l'etichetta rossa e sostituirla con la piccola vite grigia acclusa al tavolo.  
NON rimuovere la vite coperta dall'etichetta rossa.

**Regolazione dell'altezza**

- Per sollevare il vassoio, tirarlo verso l'alto.
- Per abbassare il vassoio, premere la leva nera.

**2.3 Invacare®Baya (L870)**

Vedere figura 3.

1. Installare il tubo quadrato **Ⓑ** sulla base **Ⓐ** usando una chiave a brugola.
2. Installare il vassoio **Ⓔ** sul tubo di supporto del vassoio e bloccarlo con una vite della maniglia **Ⓕ**.
3. Fare scorrere il supporto del vassoio **Ⓒ** nel tubo quadrato **Ⓑ**.  
Assicurarsi che il vassoio si trovi sopra la base.
4. Regolare l'altezza del vassoio e serrare la vite della maniglia **Ⓕ**.

**It****1 Sauga****ATSARGIAI!**

- Prieš naudodami patikrinkite, ar gaminys pristatytas nepriekaištingos būklės.
- Jeigu nesate tikri, kaip gaminį naudoti, reguliuoti ar prižiūrėti, kreipkitės į „Invacare“ platintoją.
- Neviršykite didžiausios apkrovos, nurodytos gaminio etiketėje.
- Nenaudokite ir nelaikykite gaminio lauke.
- Nuolat tikrinkite gaminio stabilumą bei tvirtumą ir, jeigu reikia, ar priveržti varžtai.

**Valymas ir dezinfekavimas**

- Nuvalykite visus nešvarumus ir dulkes minkšta, drėgna šluoste.
- Sunkiai nuvalomas dėmes nuvalykite naudodami muilą ir vandenį.
- Nusausinkite minkštu audiniu.
- Ligoninėse dezinfekuokite laikydamiesi higienos specialisto rekomendacijų.

**1.1 Garantijos informacija**

Produktui suteikiama gamintojo garantija, remiantis atitinkamų šalių bendrosiomis verslo nuostatomis ir sąlygomis.

Garantijos reikalavimus pateikti galima tik per tiekėją, iš kurio įsigytas produktas.

**2 Surinkimas****2.1 Invacare®Pausa (L865)**

Žr. 1 pav.

1. 2 varžtais pritvirtinkite dvi kojeles su ratukais **Ⓐ** po rėmu **Ⓑ**.
2. Įstatykite rankinį sraigą **Ⓒ** į viršutinę rėmo **Ⓑ** dalį.
3. Įstumkite padėklo atramos kvadratinės formos strypą **Ⓓ** į vertikalią rėmo **Ⓑ** dalį, kad padėklo atrama būtų virš rėmo pagrindo.
4. Atlaisvinkite rankinį sraigą **Ⓔ** ir įstumkite padėklą **Ⓕ** į padėklo atramą.
5. Sureguliuokite norimą padėklo nuolydį ir priveržkite rankinį sraigą **Ⓔ**.
6. Sureguliuokite padėklo aukštį ir priveržkite rankinį sraigą **Ⓒ**.

**2.2 Invacare®Kauma (L872)**

Žr. 2 pav.

**ATSARGIAI!**

Aukščio reguliavimo sistema valdoma naudojant spyruoklę.

– Atidžiai laikykitės šios pastraipos nurodymų ir nurodytos tvarkos.

1. Įstatykite stovą **Ⓑ** į pagrindą **Ⓐ**:
  - a. Įstatykite du didelius varžtus į dviejų angų plokštę ir įstatykite du mažus cilindrus.
  - b. Padėkite šią konstrukciją po pagrindu su ratukais ir prisukite varžtus per pagrindą į stovą.  
Įsitikinkite, kad padėklas yra virš pagrindo.
2. Įstatykite padėklą **Ⓒ** įstumdami jį į atramą ir užfiksuokite naudodami du 8 x 15 varžtus.
3. Įstatykite reguliavimo sistemą:  
Atsargiai atsukite mažą juodą varžtą virš raudonos etiketės ir pakeiskite jį mažu pilku varžtu, pateikiamu kartu su staliuku.  
NEATSUKITE raudona etikete uždengto varžto.

**Aukščio reguliavimas**

- Norėdami pakelti padėklą, patraukite jį į viršų.
- Norėdami nuleisti padėklą, paspauskite juodą svirtį.

**2.3 Invacare®Baya (L870)**

Žr. 3 pav.

1. Naudodami šešiakampį raktą įstatykite kvadratinės formos strypą **Ⓑ** į pagrindą **Ⓐ**.
2. Įstatykite padėklą **Ⓔ** į padėklo laikiklio strypą ir užfiksuokite rankiniu sraigtu **Ⓕ**.
3. Įstumkite padėklo laikiklį **Ⓒ** į kvadratinės formos strypą **Ⓑ**.  
Įsitikinkite, kad padėklas yra virš pagrindo.
4. Sureguliuokite padėklo aukštį ir priveržkite rankinį sraigą **Ⓒ**.

## 1 Drošība



### UZMANĪBU!

- Pirms izstrādājuma lietošanas pārlicinieties, ka tas ir piegādāts labā stāvoklī.
- Ja neesat drošs par izstrādājuma lietošanu, pielāgošanu un apkopi, sazinieties ar Invacare izplatītāju.
- Nepārsniedziet maksimālo slodzi, kas norādīta uz izstrādājuma uzlīmes.
- Nelietojiet un neuzglabājiet šo izstrādājumu ārpus telpām.
- Periodiski pārbaudiet izstrādājuma stabilitāti un stingrību un to, vai skrūves ir pievilktas, kur nepieciešams.

### Tīrīšana un dezinficēšana

- Lai notīrītu putekļus un netīrumus, izmantojiet mīkstu un mitru drānu.
- Grūti notīrāmu traipu noņemšanai izmantojiet ziepes un ūdeni.
- Noslaukiet ar mīkstu drānu.
- Dezinficēšanai slimnīcas vidē ievērojiet higiēnas speciālista ieteikumus.

### 1.1 Garantijas informācija

Mēs sniedzam ražotāja garantiju izstrādājumam saskaņā ar mūsu uzņēmējdarbības vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ir spēkā attiecīgajās valstīs.

Garantijas prasības var izvirzīt tikai ar tā pakalpojumu sniedzēja starpniecību, no kura ieguvāt izstrādājumu.

## 2 Assembly

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Skatiet 1. attēlu.

1. Pievienojiet abas kājas ritenīšiem ① zem rāmja ②, izmantojot 2 skrūves.
2. Ievietojiet skrūvi ar rokturi ③ rāmja ② augšējā daļā.
3. Bīdīet paplātes balsta ④ kvadrātveida cauruli rāmja ② vertikālajā daļā, lai paplātes balsts atrastos virs rāmja pamatnes.
4. Atskrūvējiet skrūvi ar rokturi ⑤ un bīdīet paplāti ⑥ uz tās balsta.
5. Pielāgojiet paplāti nepieciešamajā slīpumā un pievelciet skrūvi ar rokturi ⑤.
6. Pielāgojiet paplātes augstumu un pievelciet skrūvi ar rokturi ③.

### 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Skatiet 2. attēlu.



### UZMANĪBU!

- Augstuma pielāgošanas sistēmu kontrolē ar atspēri.
- Rūpīgi izpildiet šajā rindkopā sniegtos norādījumus norādītajā secībā.

1. Uzstādiet statīvu ③ uz pamatnes ①.
  - a. Ievietojiet divas lielas skrūves plāksnē ar divām atverēm un ievietojiet divus nelielus cilindrus.
  - b. Novietojiet šo montāžu zem ritenīšu pamatnes un pievelciet skrūves caur statīva pamatni. Nodrošiniet, ka paplāte atrodas virs pamatnes.
2. Uzstādiet paplāti ④, bīdot to uz tās balsta un nostiprinot to ar divām 8 x 15 skrūvēm.
3. Uzstādiet pielāgošanas sistēmu.
 

Uzmanīgi atskrūvējiet nelielo un melno skrūvi virs sarkanās uzlīmes un aizstājiet to ar nelielu un pelēku skrūvi, kas ietilpst galda komplektācijā.

NEIZŅĒMIET skrūvi, uz kuras ir sarkana uzlīme.

### Augstuma pielāgošana

- Lai paceltu paplāti, velciet to augšup.
- Lai nolaistu paplāti, spiediet melno sviru.

### 2.3 Invacare®Baya (L870)

Skatiet 3. attēlu.

1. Izmantojot sešstūru gala atslēgu, uzstādiet kvadrātveida cauruli ③ uz pamatnes ①.
2. Uzstādiet paplāti ⑤ uz tās turētāja caurules un nofiksējiet to, izmantojot skrūvi ar rokturi ⑥.
3. Iebīdīet paplātes turētāju ④ kvadrātveida caurulē ③. Nodrošiniet, ka paplāte atrodas virs pamatnes.
4. Pielāgojiet paplātes augstumu un pievelciet skrūvi ar rokturi ⑦.

## 1 Veiligheid



### LET OP!

- Controleer voordat u het product gebruikt of het bij levering in perfecte staat verkeert.
- Neem contact op met uw Invacare-distributeur als u niet zeker weet hoe u het product moet gebruiken, afstellen of onderhouden.
- Overschrijd nooit de maximaal toegestane belasting op het productlabel.
- Het product mag niet buiten worden gebruikt of bewaard.
- Controleer regelmatig of het product stabiel is en stevig in elkaar zit, en of de schroeven zijn vastgedraaid.

### Schoonmaken en desinfecteren

- Veeg vuil en stof weg met een zachte vochtige doek.
- Verwijder hardnekkige vlekken met water en zeep.
- Droog af met een zachte doek.
- Volg voor het desinfecteren in een ziekenhuisomgeving de aanbevelingen van de hygiënedeskundige.

### 1.1 Garantie-informatie

Wij bieden voor dit product een fabrieksgarantie in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden in de respectievelijke landen.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend via de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

## 2 Montage

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Zie afbeelding 1

1. Zet de twee dwarsstangen met de zwenkwielen ① met 2 schroeven vast onder het frame ②.
2. Steek handschroef ③ in de bovenkant van het frame ②.



- Schuif de rechthoekige steunstang van het werkblad ④ in het verticale deel van het frame ③ en zorg dat de steunstang van het werkblad boven het onderstel komt te zitten.
- Draai handschroef ⑤ los en schuif het werkblad ⑥ op de steunstang.
- Stel het werkblad af in de gewenste hoek en draai handschroef ⑤ vast.
- Pas de hoogte van het werkblad aan en draai handschroef ③ vast.

## 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Zie afbeelding 2



### LET OP!

Het systeem voor hoogteaanpassing werkt met een veer.

- Volg de instructies in deze paragraaf nauwgezet op, in de aangegeven volgorde.

- Installeer de staander ③ op het onderstel ①:
  - Steek de twee grote schroeven in de plaat met de twee gaten en plaats de twee kleine cilinders.
  - Zet deze constructie onder het onderstel met de zwenkwielen en draai de schroeven via het onderstel in de staander.  
Controleer of het werkblad zich boven het onderstel bevindt.
- Schuif het werkblad ④ in de steunstang en zet het vast met twee schroeven van 8x15.
- Installeer het afstelsysteem:  
Schroef de kleine zwarte schroef boven het rode label voorzichtig los en plaats er een kleine grijze schroef (bij de tafel geleverd) voor terug.  
Verwijder NIET de schroef die door het rode label wordt afgedekt.

### De hoogte aanpassen

- U kunt het werkblad hoger zetten door het omhoog te trekken.
- U kunt het werkblad lager zetten door op de zwarte hendel te drukken.

## 2.3 Invacare®Baya (L870)

Zie afbeelding 3

- Installeer de rechthoekige stang ③ op het onderstel ① met een inbussleutel.
- Installeer het werkblad ⑤ op de draagstang van het werkblad en zet het werkblad vast met handschroef ⑥.
- Schuif de draagstang van het werkblad ④ in de rechthoekige stang ③.  
Controleer of het werkblad zich boven het onderstel bevindt.
- Pas de hoogte van het werkblad aan en draai handschroef ③ vast.

## 1 Sikkerhet



### FORSIKTIG!

- Kontroller at produktet er levert i perfekt stand før du bruker det.
- Hvis du er usikker på bruk, justering eller vedlikehold av produktet, kontakter du Invacare-forhandleren.
- Overskrid ikke løftebøylens maksimumsbelastning som angitt på produktetiketten.
- Produktet skal ikke brukes eller oppbevares utendørs.
- Kontroller regelmessig produktets stabilitet og stivhet, og om eventuelle skruer er strammet.

### Rengjøring og desinfisering

- Fjern eventuelt smuss eller støv med en myk, fuktig klut.
- Vanskelige flekker fjernes med såpe og vann.
- Tørk delene med en myk klut.
- Følg hygiespesialistens anbefalinger for desinfisering i sykehusmiljøer.

## 1.1 Garantiopplysninger

Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med våre generelle forretningsvilkår i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle leverandøren av produktet.

## 2 Montering

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Se figur 1

- Fest de to føttene på styrehjulene ① under rammen ② med 2 skruer.
- Sett inn håndskruen ③ gjennom den øvre delen av rammen ②.
- Skyv det firkantede røret til brettstøtten ④ inn i den vertikale delen av rammen ②, slik at brettstøtten er over rammesokkelen.
- Løsne håndskruen ⑤ og skyv brettet ⑥ på brettstøtten.
- Juster brettet til ønsket vinkel og stram håndskruen ⑤.
- Juster brettets høyde og stram håndskruen ③.

### 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Se figur 2



### FORSIKTIG!

- Høydejusteringssystemet kontrolleres av en fjær.
- Følg instruksjonene i dette avsnittet nøye, og i angitt rekkefølge.

- Monter stativet ③ på sokkelen ①:
  - Sett inn de to store skruene i platen med to hull, og sett inn de to små sylindrene.
  - Plasser denne monteringen under styrehjulsokkelen og stram skruene gjennom sokkelen og inn i stativet. Kontroller at brettet sitter over sokkelen.
- Monter brettet ④ ved å skyve det på støtten og feste det med to 8 x 15 skruer.
- Monter justeringssystemet:  
Løsne forsiktig den lille svarte skruen over den røde etiketten og erstatt den med den lille grå skruen som følger med bordet.  
IKKE fjern skruen som er dekket av den røde etiketten.

### Stille inn høyden

- Trekk brettet oppover for å heve det.

- Trykk på den svarte spaken for å senke brettet.

## 2.3 Invacare® Baya (L870)

Se figur 3

1. Monter det firkantede røret ⑥ på sokkelen ① med en unbrakonøkkel.
2. Monter brettet ⑤ på bretttholderrøret og lås det med håndskruen ⑦.
3. Skyv bretttholderen ③ inn i det firkantede røret ⑥. Kontroller at brettet sitter over sokkelen.
4. Juster brettets høyde og stram håndskruen ⑧.

pt

## 1 Segurança



### ATENÇÃO!

- Verifique se o produto foi entregue em boas condições antes de o utilizar.
- Se estiver inseguro sobre a utilização, o ajuste ou a manutenção do produto, contacte o distribuidor da Invacare.
- Não exceda a carga máxima ilustrada na etiqueta do produto.
- Não utilize nem armazene o produto no exterior.
- Verifique periodicamente a estabilidade e a rigidez do produto e, onde aplicável, confira se os parafusos estão apertados.

### Limpeza e desinfecção

- Remova a sujidade ou o pó utilizando um pano húmido macio.
- Utilize sabão e água para remover manchas resistentes.
- Seque com um pano macio.
- Para desinfecção em ambiente hospitalar, siga as recomendações do especialista em higiene.

### 1.1 Informações da garantia

Facultamos uma garantia de fabrico para o produto, em conformidade com os nossos Termos e Condições Gerais de Compra nos respetivos países.

As reclamações de garantia só podem ser realizadas através do fornecedor ao qual o produto foi adquirido.

## 2 Montagem

### 2.1 Invacare® Pausa (L865)

Consulte a figura 1

1. Prenda os dois pés aos rodízios ① sob o chassis ② utilizando 2 parafusos.
2. Insira o parafuso de rosca ③ na secção superior do chassis ②.
3. Faça deslizar o tubo quadrado do suporte do tabuleiro ④ para a secção vertical do chassis ②, de modo a que o suporte do tabuleiro fique localizado sobre a base do chassis.
4. Desaperte o parafuso de rosca ⑤ e faça deslizar o tabuleiro ⑥ para o suporte de tabuleiro.
5. Ajuste o tabuleiro para a inclinação pretendida e aperte o parafuso de rosca ⑤.
6. Ajuste a altura do tabuleiro e aperte o parafuso de rosca ③.

### 2.2 Invacare® Kauma (L872)

Consulte a figura 2



### ATENÇÃO!

O sistema de ajuste da altura é controlado por uma mola.

- Siga as instruções neste parágrafo cuidadosamente e pela ordem indicada.

1. Instale o suporte ⑥ na base ①:
  - a. Insira os dois parafusos grandes na placa com dois orifícios e insira os dois cilindros pequenos.
  - b. Coloque a montagem por baixo da base dos rodízios e aperte os parafusos através da base até ao suporte. Certifique-se de que o tabuleiro está localizado sobre a base.
2. Instale o tabuleiro ③, fazendo-o deslizar para o respetivo suporte e fixe-o utilizando os dois parafusos 8 x 15.
3. Instale o sistema de ajuste:
  - Desaperte o parafuso preto pequeno sobre a etiqueta vermelha e substitua-o pelo parafuso cinzento pequeno fornecido com a mesa.
  - NÃO remova o parafuso coberto com a etiqueta vermelha.

### Ajustar a altura

- Para levantar o tabuleiro, puxe-o para cima.
- Para baixar o tabuleiro, prima a alavanca preta.

### 2.3 Invacare® Baya (L870)

Consulte a figura 3

1. Instale o tubo quadrado ⑥ na base ① utilizando uma chave Allen.
2. Instale o tabuleiro ⑤ no tubo do suporte do tabuleiro e aperte-o com o parafuso de rosca ⑦.
3. Faça deslizar o suporte do tabuleiro ③ para o tubo quadrado ⑥. Certifique-se de que o tabuleiro está localizado sobre a base.
4. Ajuste a altura do tabuleiro e aperte o parafuso de rosca ⑧.

SV

## 1 Säkerhet



### FÖRSIKTIGT!

- Kontrollera att produkten har levererats i perfekt skick innan den används.
- Om du är osäker på användning, justering eller underhåll av produkten kan du kontakta din Invacare-distributör.
- Maxbelastningen som anges på produktetiketten får inte överskridas.
- Produkten ska inte användas eller förvaras utomhus.
- Kontrollera med jämna mellanrum att produkten är stabil och stadig och, i tillämpliga fall, att skruvarna är åtdragna.

### Rengöring och desinfektion

- Avlägsna smuts eller damm med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd tvål och vatten till att tvätta bort fläckar.
- Torka torrt med en mjuk trasa.
- Vid desinfektion i sjukhusmiljö ska hygienspecialistens rekommendationer följas.

### 1.1 Information om garanti

Vi tillhandahåller en tillverkargaranti för produkten i enlighet med våra allmänna affärsvillkor i respektive land.

Garantianspråk kan endast göras genom den leverantör som tillhandahöll produkten.

## 2 Montering

### 2.1 Invacare®Pausa (L865)

Se bild 1

1. Fäst de två fötterna på hjulen ① under ramen ② med två skruvar.
2. Sätt i handskruven ③ i den övre delen av ramen ②.
3. Skjut in brickstödet fyrkantiga rör ④ i ramens vertikala del ② så att brickstödet är placerat ovanför ramens bas.
4. Lossa handskruven ⑤ och skjut in brickan ⑥ på brickstödet.
5. Justera brickan till önskad lutning och dra åt handskruven ⑤.
6. Justera brickans höjd och dra åt handskruven ③.

### 2.2 Invacare®Kauma (L872)

Se bild 2



#### **FÖRSIKTIGT!**

Höjdjusteringssystemet är fjäderbelastat.

– Följ instruktionerna i det här avsnittet noga och i den ordning som anges.

1. Montera röret ② på basen ①:
  - a. Sätt i de två stora skruvarna i plåten med två hål och sätt i de tv små cylindrarna.
  - b. Placera detta montage nedanför hjulbasen och dra åt skruvarna genom basen och in i röret.  
Se till att brickan är placerad ovanför basen.
2. Montera brickan ③ genom att skjuta in den på dess stöd och fäst med två 8×15 mm-skruvar.
3. Montera justeringssystemet:  
Skruva försiktigt loss den lilla svarta skruven ovanför den röda etiketten och ersätt den med den lilla grå skruven som medföljer.  
Ta INTE bort skruven som är täckt av den röda etiketten.

#### **Justera höjden**

- Hög brickan genom att dra den uppåt.
- Sänk brickan genom att trycka på den svarta spaken.

### 2.3 Invacare®Baya (L870)

Se bild 3

1. Montera det fyrkantiga röret ② på basen ① med hjälp av en insexnyckel.
2. Montera brickan ⑤ på brickhållarröret och lås fast den med handskruven ⑥.
3. Skjut in brickhållaren ③ i det fyrkantiga röret ②.  
Se till att brickan är placerad ovanför basen.
4. Justera brickans höjd och dra åt handskruven ④.

**United Kingdom & Ireland:**

Invacare Limited  
Pencoed Technology Park,  
Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
Tel: (44) (0) 1656 776 200  
uk@invacare.com  
www.invacare.co.uk

**Danmark:**

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
DK-2605 Brøndby  
Tel: (45) (0)36 90 00 00  
Fax: (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

**Deutschland:**

Invacare GmbH  
Am Achener Hof 8  
D-88316 Isny  
Tel: (49) (0)7562 700 0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

**Österreich:**

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
A-5310 Mondsee  
Tel: (43) 6232 5535 0  
Fax: (43) 6232 5535 4  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

**Schweiz / Suisse / Svizzera:**

Invacare AG  
Benkenstrasse 260  
CH-4108 Witterswil  
Tel: (41) (0)61 487 70 80  
Fax: (41) (0)61 488 19 10  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch

**España:**

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste, 50 – 1º-1ª  
Valencia-46001  
Tel: (34) 972 493 214  
contactsp@invacare.com  
www.invacare.es

**France:**

Invacare Poirier SAS  
Route de St Roch  
F-37230 Fondettes  
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

**Italia:**

Invacare Mecc San s.r.l.,  
Via dei Pini 62,  
I-36016 Thiene (VI)  
Tel: (39) 0445 38 00 59  
servizioclienti@invacare.com  
www.invacare.it

**Nederland:**

Invacare BV  
Galvanistraat 14-3  
NL-6716 AE Ede  
Tel: (31) (0)318 695 757  
nederland@invacare.com  
www.invacare.nl

**Belgium & Luxemburg:**

Invacare nv  
Autobaan 22  
B-8210 Loppem  
Tel: (32) (0)50 83 10 10  
Fax: (32) (0)50 83 10 11  
marketingbelgium@invacare.com  
www.invacare.be

**Norge:**

Besøksadresse:  
(Office addresses)  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo  
Tel: (47) 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

**Portugal:**

Invacare Lda  
Rua Estrada Velha, 949  
P-4465-784 Leça do Balio  
Tel: (351) (0)225 193 360  
portugal@invacare.com  
www.invacare.pt

**Suomi:**

Camp Mobility  
Patamäenkatu 5, 33900  
Tampere  
Puhelin 09-35076310  
info@campmobility.fi  
www.campmobility.fi

**Sverige:**

Invacare AB  
Fagerstagatan 9  
S-163 53 Spånga  
Tel: (46) (0)8 761 70 90  
Fax: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se



Invacare Portugal, Lda  
Rua Estrada Velha 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal

