

# GELTOP<sup>®</sup> / GELSCAR<sup>®</sup>



Coussin Geltop



Coussin Gelscar

AIDE À LA PRÉVENTION ET AU TRAITEMENT DES ESCARRES  
STADE 1 À 2 RISQUE FAIBLE À MOYEN

COUSSINS COMPOSÉS DE GEL VISCOÉLASTIQUE ASSOCIÉ OU NON  
À UNE BASE EN MOUSSE DE HAUTE RÉSILIENCE.

## EFFICACITÉ

- diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau grâce aux propriétés du gel viscofluide


## SÉCURITÉ

- Principe de stabilisation du coussin.

## GEL ET MOUSSE

### COUSSIN GELSCAR

- Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés du gel viscofluide.
- Réduction des pressions maximales.
- Sécurisation de l'assise par 4 cordons cousus aux 4 coins.
- Isothermie par les propriétés de l'enveloppe en néoprène cellulaire.
- Le gel peut procurer une sensation de fraîcheur au premier contact : l'enveloppe en néoprène permet de l'atténuer.

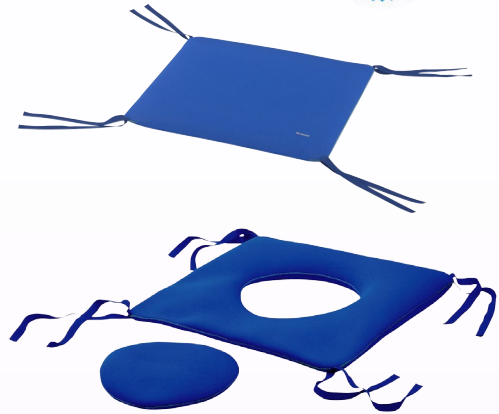

Épaisseur : 35 mm



### COUSSIN GELTOP



Pour le domicile : livré avec 2 housses  
Pour la collectivité : livré avec 1 housse

- Réduction des pressions maximales par immersion du corps dans un gel fluide supporté par une mousse de haute résilience.
- Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés du gel viscofluide.
- Thermorégulation par perméabilité de la protection à la vapeur d'eau.

Gel Fluide épaisseur : 10 mm



Mousse HR épaisseur: 45 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	REFERENCE	DIMENSIONS	POIDS PATIENT	NORMES FEU
GELSCAR pour une assise de fauteuil de largeur 38/42 et profondeur 39/42.	VGLS01C	40 x 40 x 3,5 cm	40 à 100 kg	EN 591-1 et 2
GELSCAR PERCÉ pour une assise de fauteuil de largeur 38/42 et profondeur 39/42.	VGLS03C	40 x 40 cm		
GELSCAR pour une assise de fauteuil de largeur 40/45 et profondeur 44/47.	VGLS01C/4345	43 x 45 x 3,5 cm		
GELTOP pour une assise de fauteuil de largeur 40/42 et profondeur 40/42, housse en Techmapolar.	VAB40	40 x 40 x 5,5 cm	30 à 95 kg	
GELTOP pour une assise de fauteuil de largeur 43/45 et profondeur 43/47, housse en Techmapolar.	VAB4345	43 x 45 x 5,5 cm		

Entretien : Housses



Garantie 2 ans

Photos non contractuelles

ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - E-mail : contact@askle.com

www.winnCare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE