


LIT PITCHOUNE KALIN®



Lit PITCHOUNE KALIN® présenté avec panneaux Pitchoune Kalin décor Kiwi, montants ral 9016, jupe décor Kiwi, barrières pleine longueur

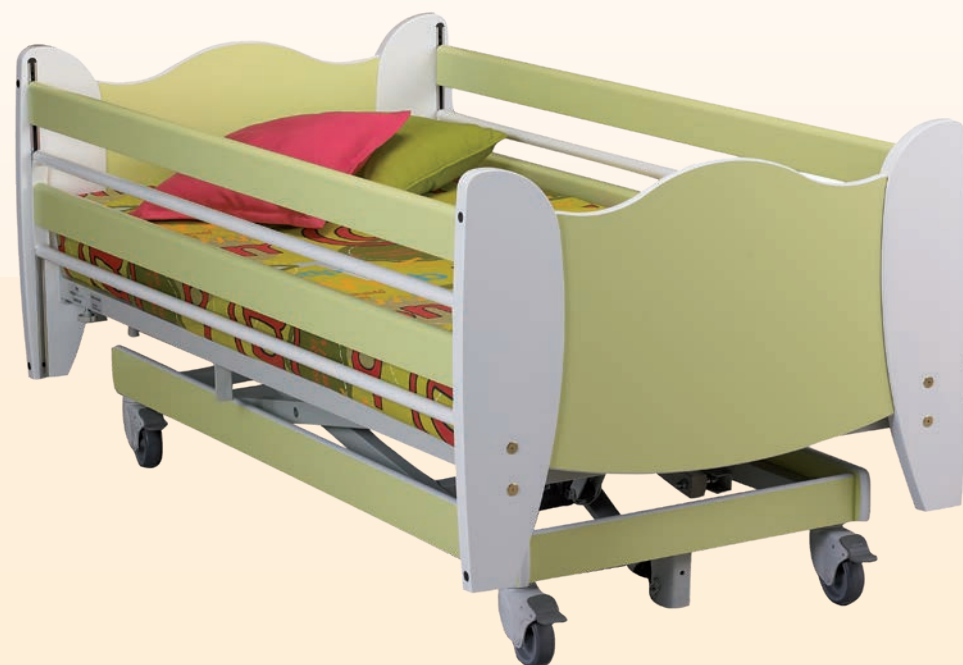

LIT POUR ENFANT

FONCTIONNALITÉ

- ▶ Sommier non divisible 160 x 80 cm
- ▶ SPlan de couchage à lattes métalliques soudées
- ▶ Prise d'équipotentialité
- ▶ 3 fonctions électriques
- ▶ Amplitude de 300 à 770 mm
- ▶ Relève buste électrique
- ▶ Relève jambes électrique avec
- ▶ plicature des genoux par crémaillères
- ▶ Sur 4 roues Ø 100 mm freinage indépendant
- ▶ Freinage centralisé en option

SECURITÉ MAXIMALE

- ▶ L'espace entre les barreaux ou deux éléments de structure est inférieur ou égal à 65 mm et l'espace entre le sommier et le bas de la barrière est inférieur ou égal à 65 mm
- ▶ Lit recommandé pour un enfant de taille inférieure à 146 cm
- ▶ Télécommande verrouillable de série
- ▶ Relève buste CPR en option

ERGONOMIE

- ▶ Faciliter les levés et les transferts lit-fauteuil grâce à la mise à plat du sommier à une hauteur de 300 mm

ESTHÉTISME

2 finitions de panneaux PITCHOUNE KALIN

- ▶ Modèle avec montants laqué blanc recevant des barrières bois pleine longueur
- ▶ modèle collectivité pour les barrières époxy avec housse de protection pour plus de sécurité



Matelas PEDIA Confort en mousse mixte viscoélastique, protégé par une housse CIC



Option : freinage centralisé.
Accessibilité et facilité d'activation

LIT ADAPTÉ

- ▶ LIT ADAPTÉ À LA MORPHOLOGIE DES ENFANTS DE 3 À 12 ANS,
- ▶ Conforme aux recommandations de sécurité sanitaire prévues par l'AFSSaPS* (France) du 26 avril 2010

SÉCURITÉ

- ▶ Barrières avec espacement inférieur à 65 mm

ERGONOMIE

- ▶ Abaissement mini du sommier à 300 mm

DÉSIGNATION	LPP	DIMENSIONS	RELÈVE BUSTE	RELÈVE JAMBES	CAPACITÉ DE LEVAGE	ROUES	NORMES	MOTORISATION
PITCHOUNE KALIN 3 fonctions électriques avec plicature	OUI	80 x160 cm sommier non divisible	70°	40,3° Plicature des genoux 14,5° réglage par crémaillères	CFS ⁽¹⁾ 170 kg Matelas 20 kg Patient 135 kg Accessoires 15 kg	Ø100 mm à freins sans pare fil	CEI 60601-2-52 compatible avec les environnements 1/2/4/5	LINAK IP 54
Accessoires	NON	Barrières pliantes époxy avec housse de protection						
	NON	Panneaux collectivité PITCHOUNE KALIN						
	OUI	Barrières pleine longueur bois et époxy						
	OUI	Panneaux PITCHOUNE KALIN (avec réservations pour barrières pleine longueur)						
	OUI	Matelas Alova PEDIA Confort 160x80x14 cm pour enfant de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans						
	OUI	Matelas Housse HR (présent dans le pack Pitchoune matelas)						

Option relève buste CPR obligatoire

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*

Garantie panneaux et accessoires 1 an*

* Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures
voir instructions d'utilisations

⁽¹⁾ Charge de fonctionnement en sécurité

Photos non contractuelles

* « Recommandations du 26/04/2010 aux utilisateurs après avis des professionnels et consultation de la Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux »

** Suivant modèles de barrières