

## BALNEO 200 réversible



Coloris stock permanent : **BLEU PASTEL**

Code article : **4060131S2**

Code GTIN : 3615800004645

Autres coloris :

Code article : **4060131S..**

Code GTIN : 36158000XXXXX

Famille :

**Aides à la toilette**

Description :


**Poignée de sortie de baignoire finition époxy avec marche pied à droite ou à gauche de la poignée.**

**Usage revendiqué :**

Les poignées de sortie de baignoires sont destinées à faciliter les transferts du patient. Leur utilisation est de fait une utilisation intérieure, en milieu humide (salle de bain - hors immersion).

**Dispositif médical :** non

**Garantie produit :** 2 ans contre tout vice de fabrication

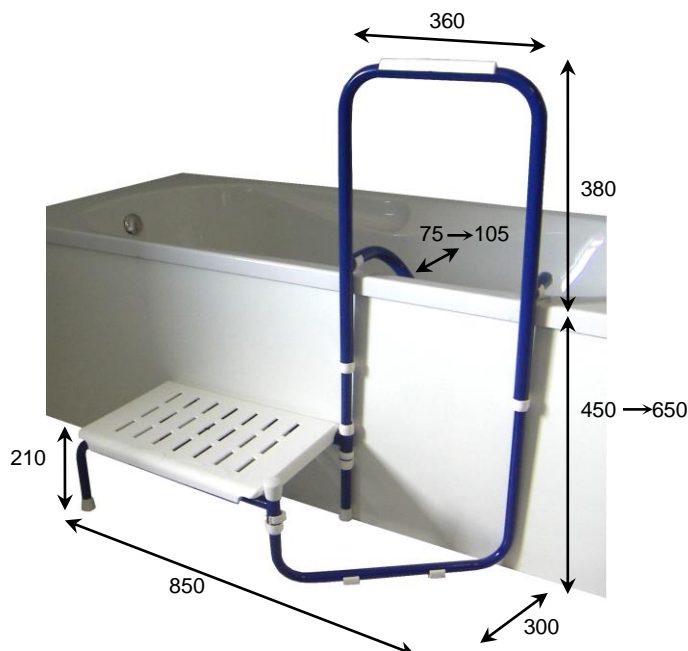

Modèle présenté : BALNEO 200 BLEU - 4060131S2

### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

- Dimensions hors tout poignée / marche  
Hauteur hors tout réglable : 830 → 1030  
Largeur hors tout : 850  
Profondeur hors tout : 490 (300+205)
- Dimensions marche plastique :  
Longueur x largeur : 300 x 450  
Hauteur marche : 210
- Hauteur poignée / bord baignoire : 380
- Compatibilité avec baignoire : épaisseur 75 à 105

#### Description technique

- Châssis en tubes acier soudés  
(tube Ø 25x1.2 et 20x1)
- Finition époxy couleur
- Blocage par butée avec vis inox
- Manchette poignée en PVC
- Marche en polypropylène

#### Poids du produit :

**4,3 kg**

#### Date de 1ère mise sur le marché : **Mars 2005**

Version mise sur le marché à partir de : **21 juin 2023**


### Etiquetage produit



## BALNEO 200 réversible



### Liste des pièces :

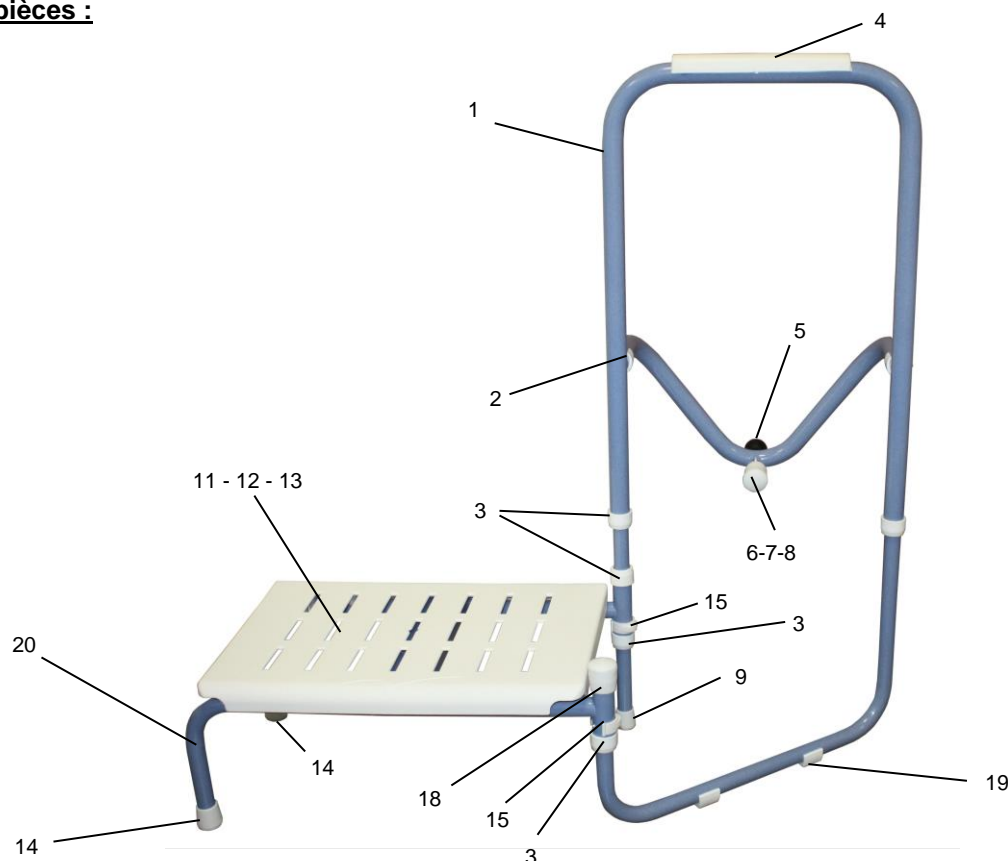

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	E406009	1	Haut poignée Balnéo
2	A406028	2	Patin à bride 24/26 blanc
3	A401002	5	Bague diam. 25 blanche
4	A401001	1	Accoudoir Candy PVC blanc
5	A008115	1	Boule de frein bakélite noire D32 M8
6	A406021	1	Embout diam. 25 envel blanc
7	A300004	1	Embout diam. 25 M8 sans écrou
8	A406010	1	Vis TH M8x100 inox
9	A406029	1	Embout diam. 20 env. blanc
10	E406024	1	Pied cintre
11	A406011	1	Assise injectée blanche
12	A406024	4	Rondelle plastique diam. 5 blanche
13	A001045	4	Vis tôle TCBLZ 5/13 cruci
14	A401003	2	Embout diam. 22 env. blanc
15	A406035	2	Clip diam 25 blanc
16	E406019	1	Pied droit
17	A000074	2	Embout diam. 22 CMM
18	A406021	1	Embout diam. 25 envel. blanc
19	A406044	2	Patin à bride 20/22 blanc
20	E406018	1	Marche balnéo 200 DG