

seca clara 803

La clarté retrouvée.



- Revêtement caoutchouc 2 composants – Pour une surface agréable au toucher.
- Quatre pieds de caoutchouc – Pour un positionnement stable.
- Grands chiffres LCD de 28 millimètres – Pour une lecture facile du poids.
- Plus de 165 ans d'expérience – Pour une précision maximale.
- la marque du leader mondial de la pesée et de la mesure médicales.

seca clara 803 :

Simplicité et performance.

Voyez le design épuré et le façonnage de cette balance : même le modèle seca le plus simple bénéficie d'une construction élaborée et renforcée. Il permet de peser sans problèmes les personnes corpulentes jusqu'à 150 kilos.



De l'utile à l'agréable.

Notre modèle le plus simple. Prenez cette balance en main et examinez la sous toutes les coutures. Son design vous fascinera tout comme la qualité supérieure visible des matériaux mis en oeuvre. Le revêtement de haute qualité du plateau est un caoutchouc spécial à deux composants particulièrement doux au toucher mais néanmoins d'une robustesse remarquable. Il va de soi qu'il résiste à tous les détergents et désinfectants courants.

Qualité professionnelle au service du particulier.

Noir ou blanc, ce modèle satisfera aussi bien les professionnels que les particuliers les plus exigeants. Il a été conçu pour tous ceux qui savent apprécier un façonnage de qualité. Mais la construction du pèse-personnes seca clara 803 est aussi soignée que son apparence extérieure : sous son plateau se trouvent d'innombrables entretoises longitudinales et transversales espacées d'un centimètre qui confèrent à cette balance son exceptionnelle stabilité.


Transport et légèreté.

Grâce à son faible poids de seulement 1,4 kilos et à une poignée intégrée dans son dos, cette balance se transporte facilement et convient donc parfaitement à une utilisation mobile. Et la lecture des résultats affichés est tout aussi commode : avec leur hauteur de 28 millimètres, les chiffres de l'unité d'affichage sont facilement lisibles. Vous voyez que même pour son modèle le plus simple, seca n'a pas lésiné sur les détails.

*Grands chiffres LCD de 28 millimètres
- Pour une lecture facile du poids.*



Nervurage serré assurant la stabilité.

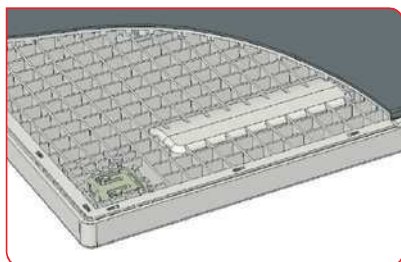

seca clara 803

Caractéristiques techniques

- Capacité : 150 kg / 330 lbs / 23 sts
- Graduation : 100 g / 0,2 lbs
- Dimensions (LxHxP) : 315 x 35 x 325 mm
- Poids : 1,5 kg
- Fonctions : Auto-HOLD, extinction automatique
- Fournis avec chaque balance : 4 piles de type AAA, 4 pieds de nivellement pour les sols recouverts de moquette