


4 ter

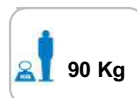

Coloris stock permanent : **NOIR DECOR**

Code article : **1030001S1**

Code ACL : 3401542609107

Code GTIN : 3615800000722

Autres coloris :

Code article : **1030001**

Code ACL : 3401053974336

Code GTIN : 3615800000715

Famille :

Cannes métalliques

Description :

Canne de malade aluminium, poignée Maginot, finition époxy

Usage revendiqué :

Les cannes métal sont des aides à la marche manipulées avec un bras.

Leur utilisation est intérieure ou extérieure

Classe du dispositif : 1 (non invasif)

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication

Remboursement LPPR : 1296787

(Canne métallique avec appui antébrachial ou poignée en T)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini* : 800 mm
- Hauteur maxi* : 975 mm
- Epaisseur poignée : 23 mm

* position médiane sur poignée – tolérance \pm 5mm

Description technique

- Mât : tube alu Ø 20 x 1 (roulé soudé - 5086)
8 positions (tous les 25mm)
- Rallonge haute: tube alu Ø 17,2 x 1 (roulé soudé - 5086)
- Bague anti-jeu Ø 20 noire entre mât et rallonge
- Blocage du réglage en hauteur: cliquet simple Ø 6 mm
- Poignée Maginot noire en PP
- Embout Ø 18 anti-bruit
- Embout 19x40 noir
- Finition : époxy couleur au choix

Poids du produit :

0, 270 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Mai 2004


Etiquetage produit



4 ter



Liste des pièces :

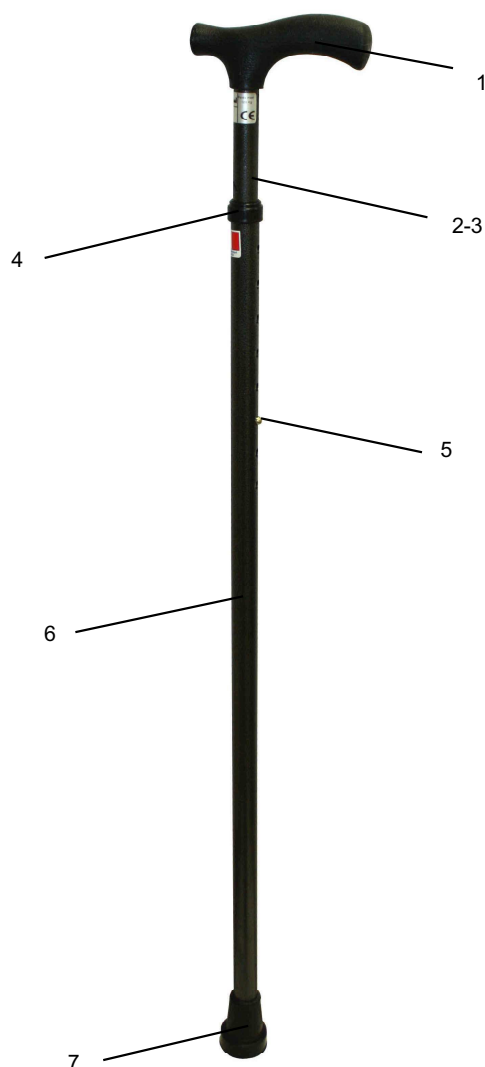

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000065	1	Poignée noire Maginot
2	E103003	1	Rallonge canne malade brut 455
3	A000035	1	Embout diam. 18 int
4	A000003	1	Bague diam. 20 noire
5	A001053	1	Cliquet simple de 6
6	E103002	1	Mât canne malade brut lg 700
7	A000218	1	Embout 19x40 noir

Edition 4 – Mars 2016



Siège social :
Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé
59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 64 81 50
Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212
24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50
Fax : +33 (0)5 53 63 06 07