

## VERTIC EASY



Coloris stock permanent : **BLEU FRANCE / BLANC**  
Code article : **5010042S1**  
Code GTIN : 3615800004782

Famille :  
**Verticalisateur**

Description :  
**Appareil modulaire de verticalisation, taille adulte.**

Usage revendiqué :  
Verticalisateur sur socle pivotant permettant de réaliser un transfert de position assise à une autre position assise (lit vers fauteuil – fauteuil de repos vers fauteuil à roues ...).

Dispositif médical : oui      Classe du DM : I

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR : 6259271  
(APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION, MODELE ADULTE, VILGO)



**Vertic Easy**

### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

- Hors tout : 1300 (H) x 510 (Prof) x 470 (larg)
- Base : disque 450 mm (diam) x 20 mm (hauteur)
- Poignées patient :
  - . hauteur 880 à 1050 mm
  - . largeur 450 mm
- Poignées soignant :
  - . hauteur 1070 à 1240 mm
  - . largeur 450 mm
- Appui tibial : 200 (h) x 160 (larg)  
hauteur par rapport à la base : 290 à 470

tolérances dimensionnelles  $\pm 5$ mm

#### Description technique

- Structure acier mécano soudée finition époxy.
- Disque acier à pivot sur billes et socle anti dérapant.
- Appui jambe polyuréthane sur pivot (8 positions de réglage en hauteur).
- 2 roulettes  $\varnothing 60$  de déplacement à vide.
- Poignées patient et soignant en PVC sur tube acier diam. 25x1.2 mm (8 positions de réglage en hauteur).
- Pédale freinage rotation et stabilisation.
- Emballage unitaire 1350 X 550 X 490.
- Sangle de soutien optionnelle.

Poids du produit :

**16 kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Mars 2009**

Version mise sur le marché à partir de: **21 juin 2023**

### Etiquetage produit




## VERTIC EASY



### Liste des pièces :

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A501145	1	Embout env 50x20x1.5 noir
2	E501080	1	Mât
3	E501088	2	Doigt indexage Vertic Easy
4	A105000	4	Poignée diam. 25 noire
5	A000030	2	Embout diam. 25 EAB noir
6	E501082	1	Poignée Vertic Easy
7	A207128	8	Demi-palier rectangle accoudoir
8	A501210	2	Embout diam 25 envel noir souple poignée vertic
9	A501020	2	Appui jambe
10	A001010	6	Vis TCB 5x20 cruci
11	A000220	6	Entretoises plast DRD 10x6x6
12	E501015	1	Support appui jambe
13	A000025	2	Embout EDB 22/30 pour 305
14	A007024	1	Patin à bride 24/26
15	A501134	1	Patin frein 15x20x50
16	A702017	2	Vis tête 3.9x13 TCB cruci ZI
17	A008918	2	Roue diam. 60 à bandage grise
18	A204012	2	Vis TH 8x45 inox
19	A501154	2	Douille 10x1 lg 30 Zi
20	A001004	2	Ecrou frein diam. 8
21	A000013	4	Protège écrou diam. 8
22	A106023	1	Molette femelle trigo D60 M8
23	A001118	1	Vis TH 8x65 corps de boulon
24	E501084	1	Support bas mât Vertic Easy
25	A501141	5	Vis métaux TCB BTR 6x12 zn
26	A001000	5	Ecrou frein diam. 6
27	A501126	1	Disque pivotant Vertic Easy
28	A501122	1	Ferrure pivotante Vertic Easy
29	A501140	4	Vis TCB BTR 5x6 inox
30	A001075	8	Rondelle diam. 5
31	A501214	1	Couronne téflon D450 d305 e8
32	A501125	1	Disque sol transfert
33	A102029	11	Rivet 4.8x16 acier / acier

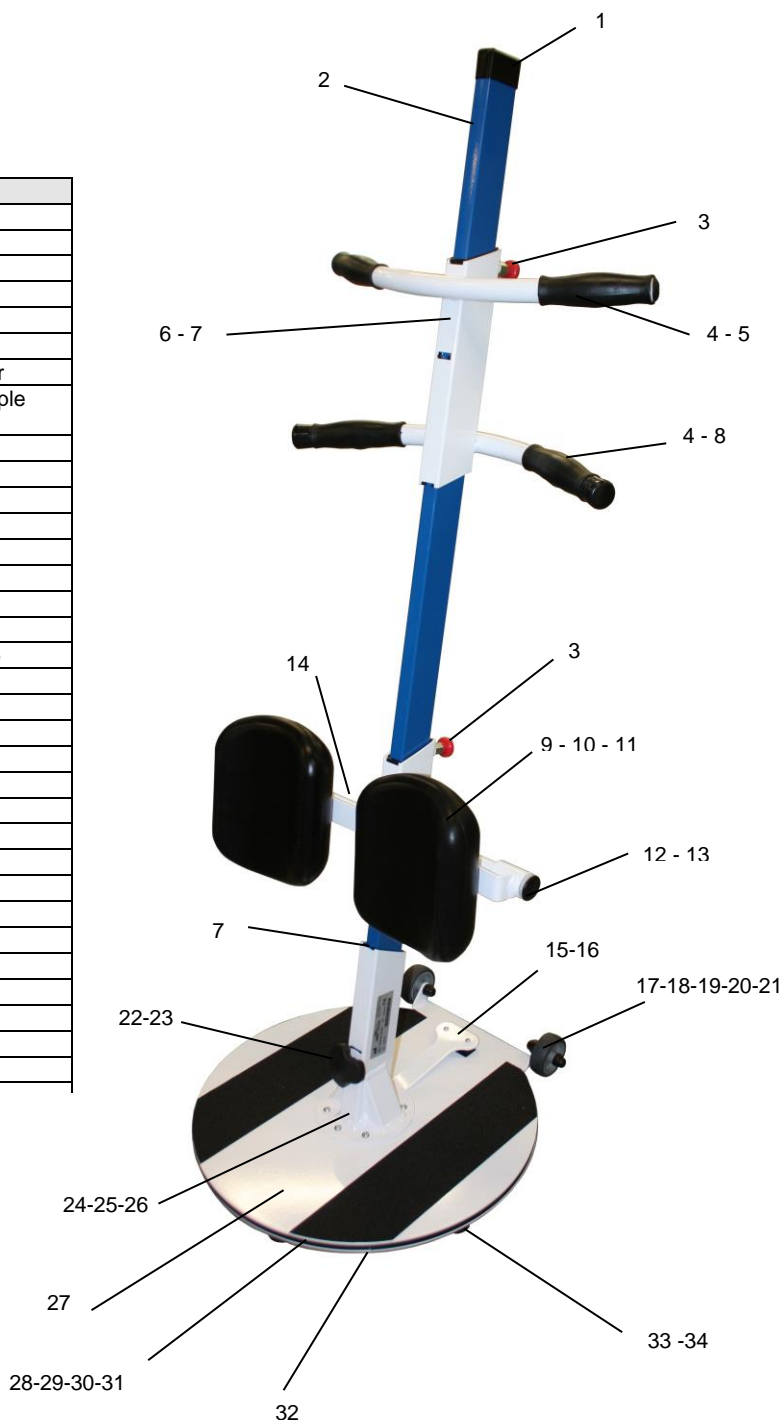

Edition 7 – Juin 2023



Siège social :  
Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé  
59120 LOOS LEZ LILLE  
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50  
Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse  
B.P. 212  
24102 BERGERAC Cedex  
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50  
Fax : +33 (0)5 53 63 06 07