


Lève-patient *Samsoft 175*



NOUVEAUTÉ

VERSION
écartement électrique
des longerons

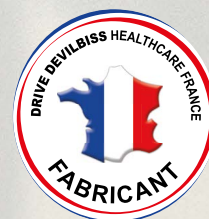

- Facile d'utilisation
- Compact
- Garanti 5 ans

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Samsoft 175

Facile d'utilisation

Nouvelle pédale d'écartement :
3 fois moins de force nécessaire à l'ouverture⁽¹⁾.

Ouverture utile 73 cm (au centre des longerons).
Permet le ramassage au sol du patient.

Hauteur réduite de la base 9cm, facilite l'accès sous tous types de lits.

Roues à double galets, Ø 75 mm. Haut niveau de roulage et solidité.

Bielle réglable

Système avec blocage des longerons pour le transport.

⁽¹⁾ En comparaison avec la précédente version du SAMSOF 175.

Amplitude de levage max :
173 cm (avec palonnier 4 points)



Poignée de poussée ergonomique.
Permet de trouver une position des mains idéale et efficace

NOUVEAUTÉ



Réf. SR 281 0200



VERSION ÉCARTEMENT ÉLECTRIQUE DES LONGERONS

*Écartement par un vérin électrique,
Pour une plus **GRANDE** ouverture,
RAPIDE et **SANS EFFORT**.*

Samsoft 175

Compact



Encombrement minimum associé à une structure légère, pour un lève-patient maniable et sécurisant (largeur hors-tout en position fermée : 63cm)




Aucun démontage nécessaire. Le palonnier s'insère dans le mât à l'aide de la télécommande. Le vérin reste protégé par la structure.
Peut se ranger contre un lit, pour un gain de place.

Structure équilibrée permettant d'être **le rangement à la verticale**, sans démontage et en toute sécurité.

Alimentation électrique

Recharge de la batterie, 2 possibilités :
sur socle ou directement sur prise secteur.

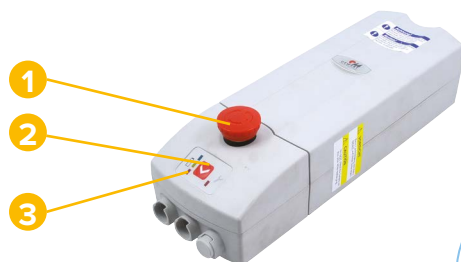

1. Arrêt d'urgence
2. Descente électrique d'urgence
3. Voyant de fonctionnement



En branchant directement l'appareil à une prise secteur murale grâce au chargeur intégré **ou** à distance en enlevant la batterie pour la connecter seule à une prise secteur murale.

Batterie bien chargée = durabilité.

Une fiabilité reconnue : **99% de fiabilité des batteries***

(*étude interne service qualité Drive DeVilbiss Healthcare France sur 2015/2016)

Samsoft 175


Sécurité Certifié conforme à la norme ISO 10535 par un **organisme indépendant reconnu** (CERAH).

Palonnier 4 points de série équipé de crochets recourbés anti retour, assurant un accrochage simple et sécurisé.



Garantie 5 ans sur structure, vérin et boîtier de contrôle.

Options

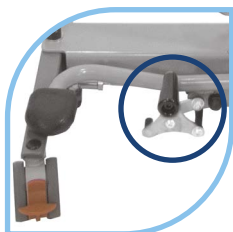

Système blocage des longerons en position ouverte
Réf. SR 287 0100



Palonnier cintré 2 points
amplitude de levage de 177 cm
Réf. SR 285 1200



Peson non Classe III
Réf. SR 282 0400



Peson Classe III
Réf. SR 282 0500

Sangles

Sangles disponibles au catalogue :

- sangle polyester confort,
- filet bain,
- hamac filet bain,
- hamac filet toilette.



Voir notre documentation en ligne directement en scannant ce Flash Code

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence du Samsoft 175 version écartement manuel (M) version écartement électrique (E)	SR 281 0100
	SR 281 0200
Capacité de levage	175 kg
Hauteur de levage maxi (palonnier 4 points)	173,5 cm
Hauteur de levage maxi (palonnier 2 points)	177,5 cm
Largeur hors-tout de la base	63 cm
Longueur hors-tout	135 cm
Hauteur de la base (châssis)	9,5 cm
Ecartement intérieur des longerons	(M) : 52 à 81 cm (E) : 52 à 96,5 cm
Poids net de l'appareil (sans palonnier)	(M) : 35,7 kg (E) : 36,4 kg

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

