



Table de kinésithérapie-ostéopathie électrique

Gamme 777

777 02-PREMIUM

CARINA
Médical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Table de kinésithérapie-ostéopathie à hauteur variable électrique, 2 plans
- Commande : Cadre périphérique tout autour du pied
- Réglage de la tête en toutes positions par vérin à gaz
- Sellerie tendue plate bi-densité (**mousse très réactive**), mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 7cm (dont mousse confort 10mm)
- Châssis composé d'un vérin électrique 6000N
- Trou visage en forme de goutte d'eau pour un meilleur confort pour le patient , avec bouchon
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard
- Sur 4 roulettes escamotables diam. 75mm

DIMENSIONS

- Largeur 60cm, longueur tête 76cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

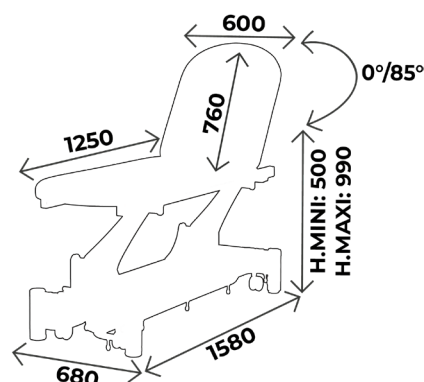


Table idéale
pour kinésithérapeutes

Vous aimerez aussi :

Réf. **77702-LIGHT** : Idem 77702 PREMIUM mais sans roulettes, avec mousse ferme HR42 et commande par pédale



À SAVOIR


- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 125-KINE

Porte-rouleau papier pour tables largeur 60cm (monté côté pieds)

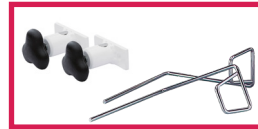

KINEGYNECO

Paire d'étaux et paire d'étriers chromés




GYNECOLUXE

Paire d'étaux et paire de repose jambes sur rotule



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité

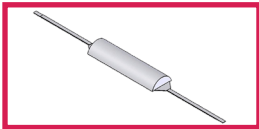

ACC 54001

Têteière 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1

LES COUSSINS



COUSSIN-001

Coussin rectangulaire, mousse HR dim. 440x200x75mm




COUSSIN-002

Coussin 1/2 cylindrique, mousse HR dim. 450x120mm, rayon 120mm



COUSSIN-003

Coussin cylindrique, mousse HR dim. 500x160mm

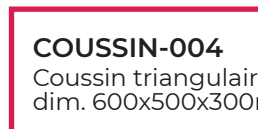

COUSSIN-004

Coussin triangulaire, mousse HR dim. 600x500x300mm

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
sans plus value

Revêtement : Sellerie Gamme Classique




Arno




Garonne




Potomac

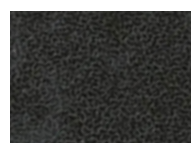

Amour

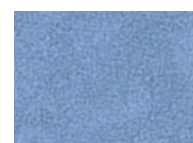


Mississippi

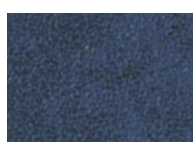

St Laurent




Rhône

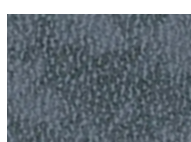

Missouri



Seine

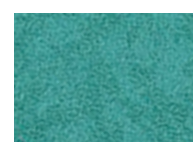

Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban




Aysse



Cendre



Origan

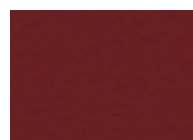


Géranium




Réglisse




Prune

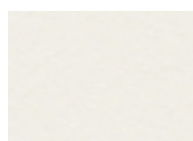


Perle

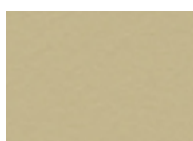


Ficelle

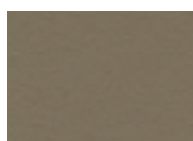


Terre

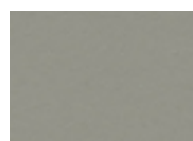


Béton

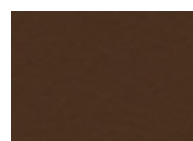

Chataigne

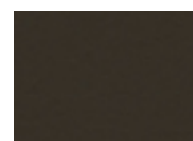

Chocolat

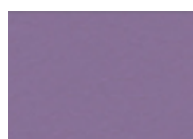

Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia




Tomate


COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme 777 a un piètement coloris gris clair (RAL 7035) en standard
Possibilité de changer le coloris **sans plus value**


Piètement Peinture EPOXY



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003

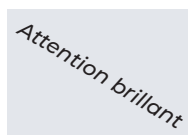

ARGENT



GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT



Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com