


519



Code article :	1010000
Code ACL :	3401521090087 (taille1) 3401542605024 (taille2) 3401542605192 (taille3) 3401542605253 (taille4) 3401542605314 (taille 5)
Famille :	Béquilles aisselles
Description :	Béquille aluminium réglable en hauteur
Usage revendiqué :	Aide à la marche
Classe du dispositif :	I
Garantie produit :	2 ans contre tout vice de fabrication

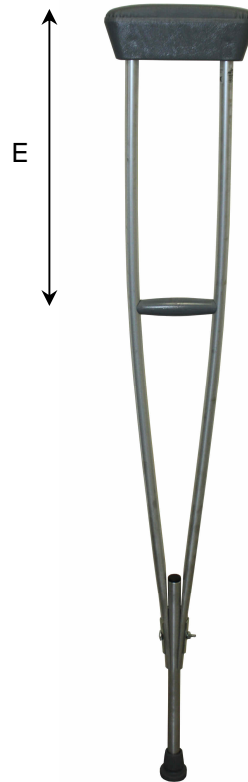

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Taille 1 (petit enfant) :
Hauteur* mini / maxi : 950 / 1100 mm
E: 355 mm
- Taille 2 (enfant) :
Hauteur* mini / maxi : 1050 / 1200 mm
E: 380 mm
- Taille 3 (taille moyenne):
Hauteur* mini / maxi : 1150 / 1300 mm
E: 410 mm
- Taille 4 (grande taille):
Hauteur* mini / maxi : 1250 / 1400 mm
E: 445 mm
- Taille 5 (très grande taille):
Hauteur* mini / maxi : 1400 / 1550 mm
E: 485 mm
- dimensions dessus de béquille: 190x30x70mm
- épaisseur mousse : 15 mm

* hauteur sol / dessus de béquille

Description technique

- Mât : tube alu ano. Ø 17,2 x 1 (roulé soudé - 5086)
- Quillon : tube alu Ø 20 x 1 (roulé soudé - 5086)
 . plage de réglage du quillon : 8 positions (tous les 25mm)
 . dispositif de serrage du quillon : vis métaux TCF 6x50 + écrou oreille Ø 6 + 2 plaquettes BR zinguées.
- Poignée en PP + insert acier
- Dessus et dessous de béquille en PP + garniture mousse
- Embout : Optiflex gris
- Finition : anodisée
- Emballage : par paire en poche 300 x 1250

Poids du produit :

Taille 1 : **0,48 kg**
Taille 2 : **0,53 kg**
Taille 3 : **0,56 kg**
Taille 4 : **0,58 kg**
Taille 5 : **0,63kg**

Date de 1ère mise sur le marché : Avant 1998

Version mise sur le marché à partir de: **Avril 2016**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE



519

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Liste des pièces :

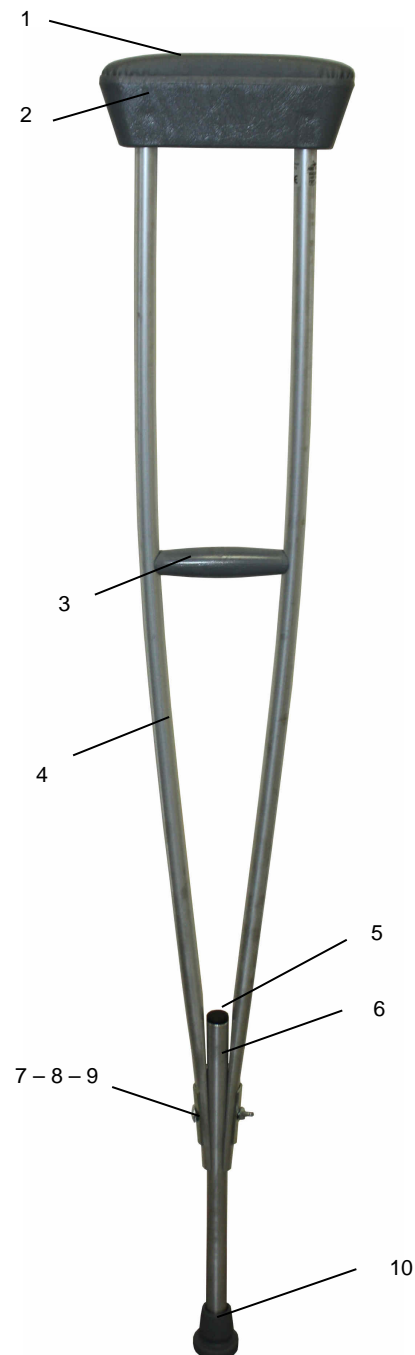

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000780	1	Dessus de béquille
2	A000779	1	Dessous de béquille
3	A000034	1	Poignée gueule de loup
4	/	2	Mât béquille tube alu 17.2x1 ano
5	A000081	1	Embout diam 20 EAZ noir
6	/	1	Rallonge béquille tube alu 20x1 ano
7	A001037	1	Vis métaux TCF 6x50
8	A001265	2	Plaquette BR zinguée béquille
9	A001003	1	Ecrou oreille diam. 6
10	A102068	1	Embout Optiflex gris